

Руководство пользователя

Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.



Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 MES603

Электрическая зубная щетка



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Примечание: При первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не привыкли к настолько эффективной чистке. При переходе с ручной зубной щетки на электрическую рекомендуется использовать режим легкой чистки, а затем постепенно переходить на стандартный. Как правило, эти симптомы исчезают в течение 1–2 недель. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите пользоваться данной зубной щеткой и обратитесь к стоматологу.

Предупреждение

1. Пользователи, которым установлен внутричелюстной зубной имплантат или которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформаций зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматологов.

2. Зубная щетка Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, проконсультируйтесь перед использованием данного изделия с врачами или производителями имплантированных устройств.

3. Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используйте изделие строго по назначению. При возникновении боли или дискомфорта немедленно прекратите использование данного изделия и обратитесь к врачу.

Запреты и недопущения

1. Не погружайте зарядный кабель в воду или любую другую жидкость.

2. После чистки проверьте, что контакты штепселя питания полностью сухие, а затем подключите штепсель к источнику питания.

3. Данное изделие содержит встроенные перезаряжаемые батареи. Не бросайте изделие в огонь, не заряжайте, не используйте и не размещайте его в местах с высокой температурой.





4. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтировать изделие.

Важные примечания

1. Перед использованием проверьте изделие на наличие явных повреждений. Если изделие повреждено или разбито, не используйте его.
2. Перед подключением к источнику питания проверьте, что он соответствует напряжению, на которое рассчитано изделие.
3. Если зарядный кабель имеет повреждения, не используйте его.
4. Если данное изделие (включая ручку и головку зубной щетки) имеет признаки поломки, прекратите его использование.
5. Не заряжать в условиях высокой температуры (не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей).
6. Не используйте зубную щетку во время купания в ванной и под душем.

Совет: Не допускайте общего пользования головкой зубной щетки совместно с другими людьми.


ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

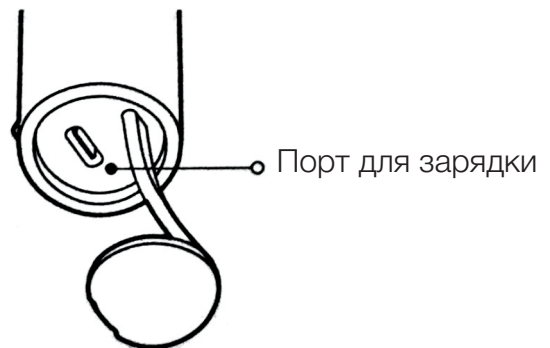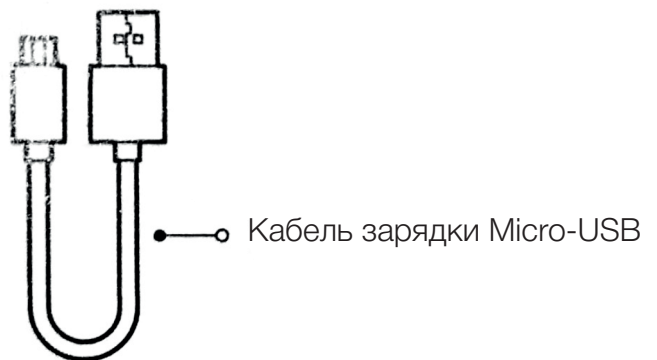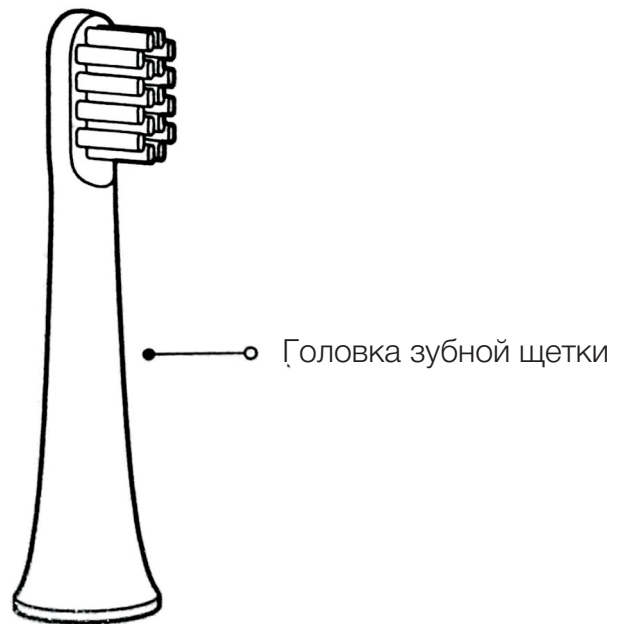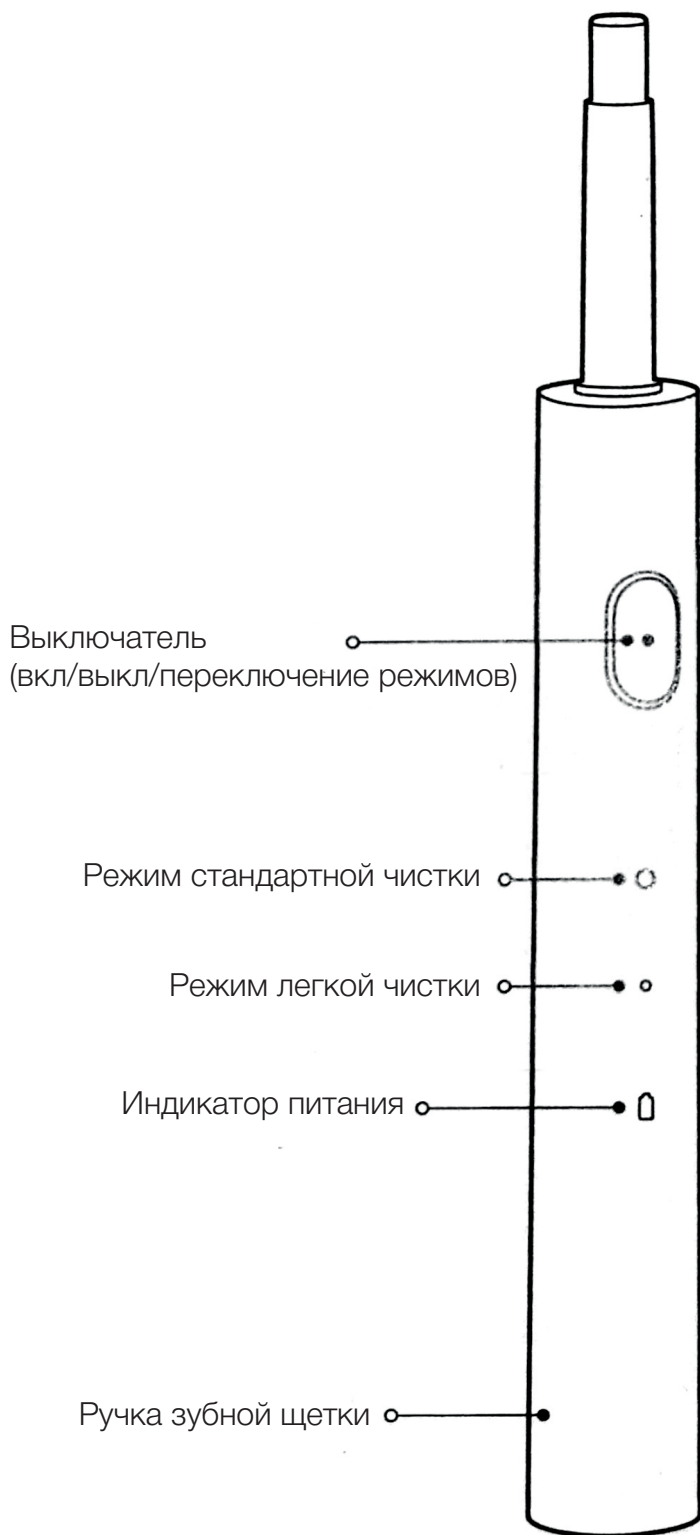


ИНСТРУКЦИЯ

1. Перед использованием установите головку зубной щетки.
2. Прикрепите головку зубной щетки к ручке зубной и проверьте, что между двумя деталями зубной щетки имеется определенный промежуток.


Промежуток необходим для того, чтобы головка зубной щетки не сталкивалась с ручкой зубной щетки во время высокочастотной вибрации и двигатель работал на полную мощность.

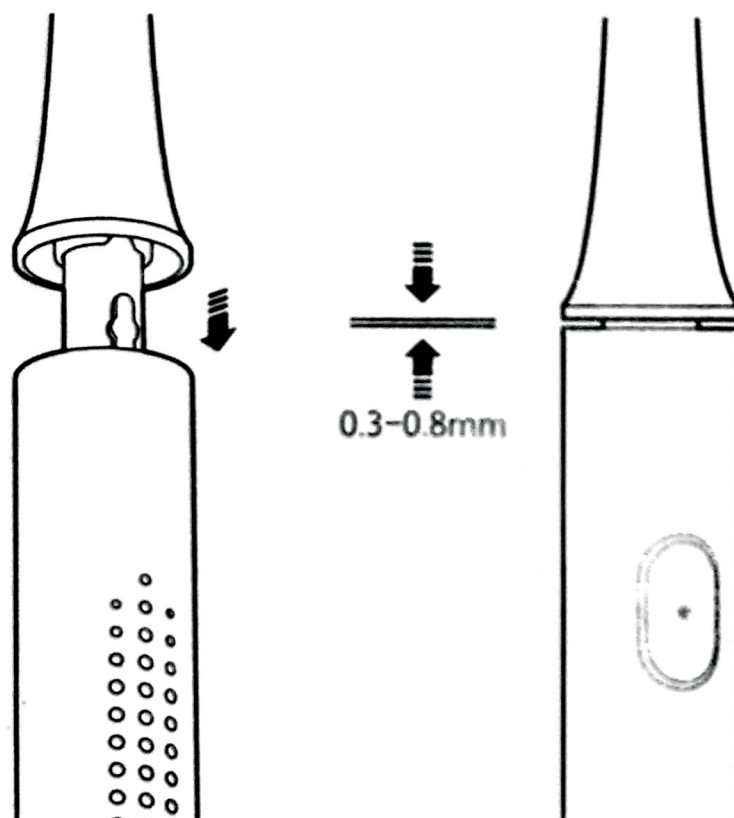

3. Смочите головку зубной щетки и выдавите нужное количество зубной пасты на головку зубной щетки.

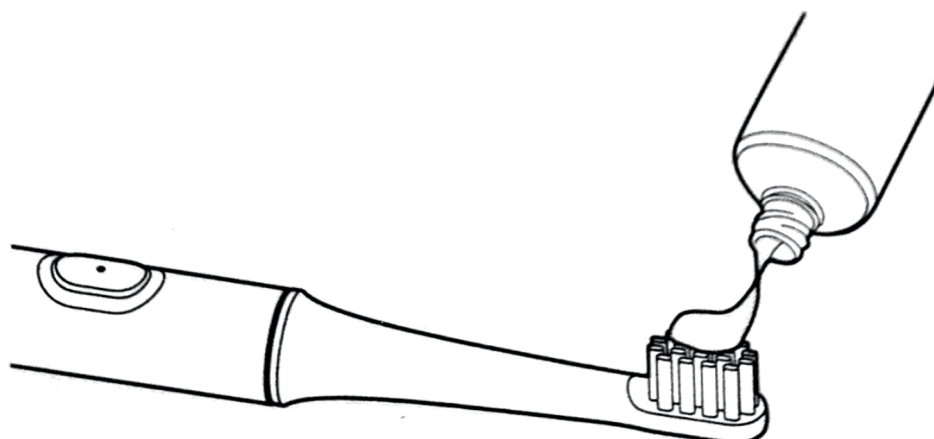

4. Выберите режим

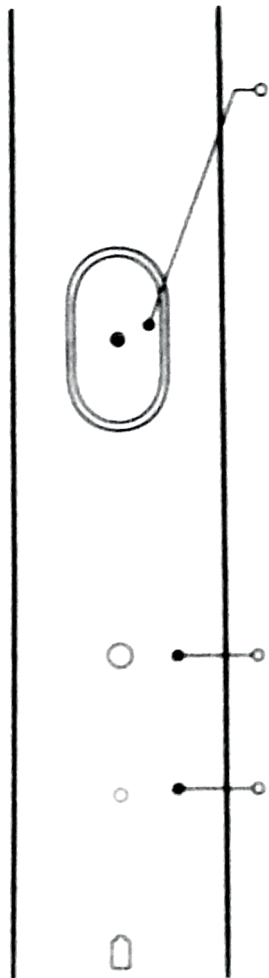

Включение: чтобы включить устройство, следует коротко нажать на кнопку.

Переключение режимов: По первому нажатию щетка начинает работу с режима стандартной чистки. Если в течении 10 сек нажать на кнопку еще раз, включается режим мягкой чистки. После третьего нажатия в течении 10 сек щетка отключается.

Индикатор режима стандартной чистки.

Подходит для интенсивной очистки налета от кофе и чая.



Индикатор режима легкой чистки.

Бережный режим для чувствительных зубов.

Подойдет начинающим пользователям.

5. Чистите зубы для поддержания их здоровья

- Медленно перемещайте зубную щетку, поддерживая угол 45° между щетиной зубной щетки и деснами.
- Можно нажать выключатель во время чистки, чтобы легко переключать режим чистки.
- Каждые 30 секунд во время чистки зубная щетка на время прекращает вибрировать, напоминая о необходимости изменить положение чистки.
- Если в использовании зубной щетки нет активной паузы, она автоматически выключится после завершения режима чистки зубов.

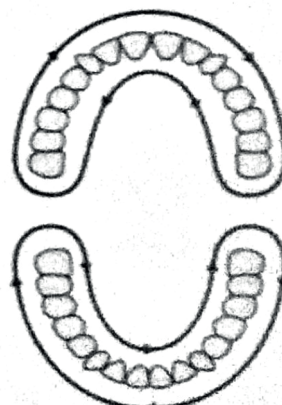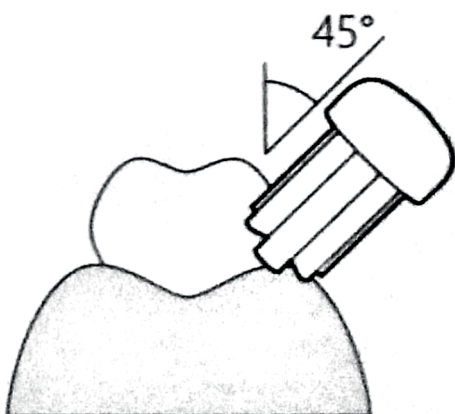

6. Очистите головку зубной щетки

После чистки зубов ополосните головку зубной щетки под краном. Зазор между ручкой и головкой зубной щетки также рекомендуется регулярно чистить.

Примечание 1: НЕ промывайте головку щетки и ручку водой выше 65°C. Это может нанести повреждения.

Примечание 2: Рекомендуется менять головку зубной щетки каждые три месяца.




7. Регулярно заряжайте устройство

Индикатор заряда батареи	Индикатор заряда батареи во время зарядки
100%-30%: индикатор горит зеленым	30%-100%: индикатор мигает зеленым
30%-10%: индикатор горит красным	30%-10%: индикатор горит красным
<10%: после 5 миганий индикатора красным устройство отключается и не включается	100%: индикатор горит зеленым. Устройство полностью заряжено

Когда батарея разряжена (индикатор горит красным, мигает красным или устройство не включается), поставьте зубную щетку на зарядку. Зарядный порт находится в нижней части ручки. Снимите защитную крышку и подключите оригинальный зарядный кабель. Для полной зарядки необходимо 4 часа.

Примечание: зарядный кабель НЕ поддерживает быструю зарядку других устройств и передачу данных.

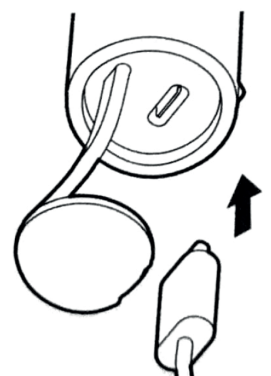

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перезаряжаемые литиевые батареи внутри изделия могут содержать загрязняющие вещества. Перед утилизацией изделия или передачей его на переработку в уполномоченный пункт утилизации, обязательно удалите батареи из устройства и передайте их в специальный пункт утилизации батарей. Если батареи удалить из устройства не удалось, их можно отправить вместе с устройством в сервисный центр Mi. Специалисты сервисного центра удалят батареи из устройства и обеспечат их экологически безопасную утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100

Модель: MES603

Номинальное напряжение: 3,7 В

Номинальная мощность: 0,6 Вт

Время зарядки: 4 часа

Степень влагозащиты: IPX7

Режим зарядки: индуктивная зарядка

Вход питания: 5 В 0,5 А

Сделано в Китае

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Устройство невозможно включить	Устройство заряжается	Отключите зубную щетку от зарядки
	Низкий заряд батареи	Зарядите зубную щетку
Головку зубной щетки невозможно установить непосредственно на приводной вал	В отверстии зубной щетки присутствуют посторонние предметы	Очистите щетку и головку от посторонних предметов
	Установленная головка зубной щетки не является оригинальной головкой зубной щетки	Приобретите оригинальную насадку
	Головка зубной щетки установлена неправильно	Правильно установите головку зубной щетки
Вибрация головки зубной щетки слабая.	Головка щетки установлена неправильно	Установите головку правильно
	Низкий или отсутствует заряд батареи	Зарядите зубную щетку